

NeuroMood

Manual para Pacientes y Profesionales

Guia descriptiva de NeuroMood Suite para pacientes y NeuroMood Hub para profesionales. Incluye instalacion, modulos, uso clinico, privacidad y aviso legal.

■ Este documento es descriptivo y orientativo. Las imagenes son simulaciones del mockup y no representan el producto final.

NeuroMood Suite para pacientes

NeuroMood Suite reúne herramientas breves, visuales y repetibles. Su objetivo no es exigir mas carga al paciente, sino transformar momentos cotidianos en registros utiles para el acompanamiento terapeutico. La aplicacion funciona principalmente sin conexion a internet (offline-first) y sincroniza datos cuando hay conectividad disponible.

7 Modulos de acompanamiento

Cada modulo aborda un aspecto concreto del autocuidado y la terapia: registro emocional, respiracion guiada, reestructuracion cognitiva (TCC), rutina diaria, activacion conductual, temporizador de enfoque y recordatorios.

■ Animo

Registro emocional diario con escala visual, nota breve y grafico semanal de tendencias.

■ Respirar

Guia de respiracion animada con tecnicas 4-7-8, Box 4x4 y Coherente. Incluye indicador de calma y BPM.

■ Registro TCC

Registro de pensamientos en 4 pasos: situacion, pensamiento automatico, intensidad emocional y respuesta alternativa. Con deteccion automatica de distorsiones cognitivas.

■ Rutina

Checklist diario organizado por momentos del dia (Manana, Tarde, Noche) con indicadores de progreso y nota diaria.

■ Actividades

Sugerencias de activacion conductual basadas en el animo actual, filtradas por categoria y con acciones de completar/omitir.

■ Timer


Temporizador de sesiones de enfoque con presets de duracion, historial diario y arco de progreso visual.

■ Avisos

Recordatorios configurables con busqueda, indicador de completados y persistencia en background.

2 temas visuales: Dark Hybrid y Light Hybrid, disenados para minimizar la fatiga visual y adaptarse a la preferencia del usuario.

Pantalla principal (Home)

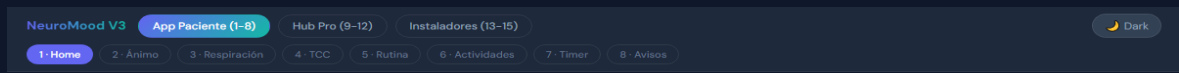


Vista del Home con grid de módulos, saludo contextual, racha de actividad y toggle de tema oscuro/claro. Imagen orientativa del mockup.

Modulos en detalle


A continuacion se muestran las pantallas principales de cada modulo con su proposito clinico. Todas las imagenes son orientativas y provienen del mockup de diseno.

Termometro Emocional

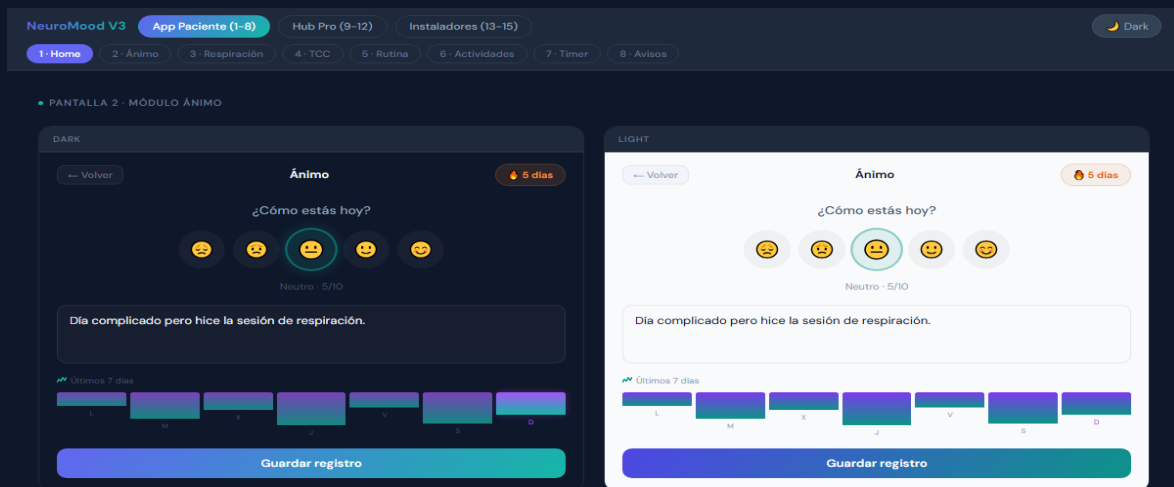

Registro diario del estado de animo con selector visual de 5 niveles, nota contextual opcional y grafico semanal de tendencias. Permite al paciente expresar como esta en menos de 30 segundos.

Guia de Respiracion Animada

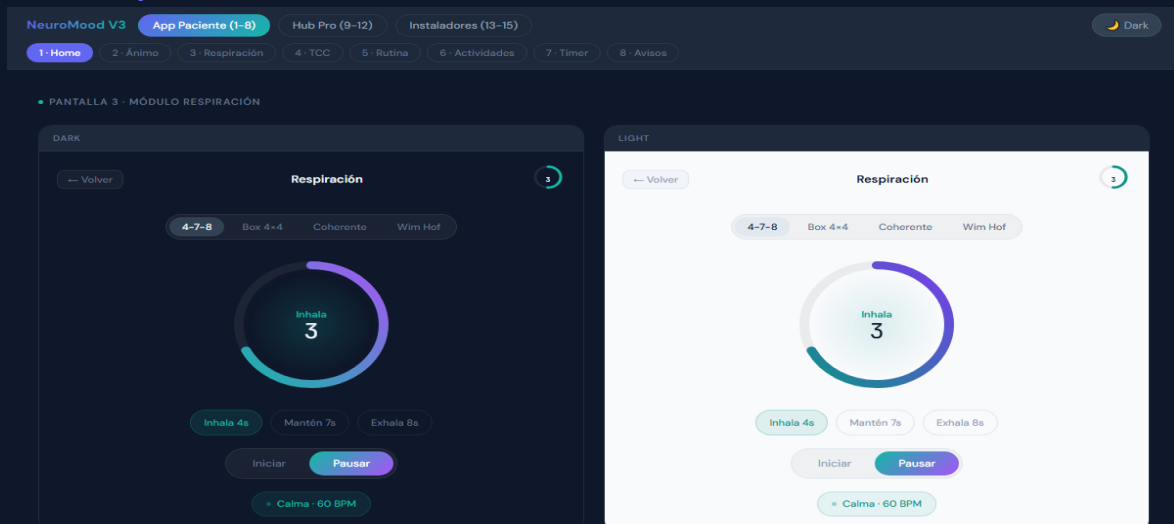

Ejercicios de respiracion con ritmo visual, arco de progreso y fases claras (Inhala 4s, Mantén 7s, Exhala 8s). Util para bajar activacion fisiologica antes o despues de una intervencion.

Registro de Pensamientos (TCC)

NeuroMood V3

App Paciente (1-8)

Hub Pro (9-12)

Instaladores (13-15)

Dark

1 Home

2 Ánimo

3 Respiración

4 TCC

5 Rutina

6 Actividades

7 Timer

8 Avisos

PANTALLA 4 · MÓDULO TCC · REGISTRO DE PENSAMIENTOS

DARK — PASO 3 ACTIVO (INTENSIDAD)

Volver

Registro TCC

Paso 3/4

1 Situación

2 Pensamiento

3 Intensidad

4 Alternativa

¿Qué emoción sentiste?

Nombra la emoción (ansiedad, tristeza, enojo, etc.)

Ansiedad

¿Qué tan intensa fue? (0-100)

0 — Calma50 — Moderada100 — Máxima

72

Distorsiones detectadas automáticamente:

Catastrofización

Todo-o-nada

Minimización

Anterior

Siguiente

LIGHT — PASO 1 ACTIVO (SITUACIÓN)

Volver

Registro TCC

Paso 1/4

1 Situación

2 Pensamiento

3 Intensidad

4 Alternativa

¿Cuál fue la situación?

Describe el contexto: ¿dónde estabas, qué pasó?

Estaba presentando el informe mensual cuando noté que todos me miraban y empecé a dudar de mis datos.

143 / 500

Anterior

Siguiente

Formulario guiado en 4 pasos con stepper visual, barra de intensidad emocional y detección automática de distorsiones cognitivas (catastrofización, todo-o-nada, minimización, etc.).

Checklist de Rutina Diaria

NeuroMood V3

App Paciente (1-8)

Hub Pro (9-12)

Instaladores (13-15)

Dark

1 Home

2 Ánimo

3 Respiración

4 TCC

5 Rutina

6 Actividades

7 Timer

8 Avisos

PANTALLA 5 · MÓDULO RUTINA · CHECKLIST DIARIO

DARK

Volver

Rutina del día

8/10 · 80%

Mañana

3/3 ✓

✓ Meditación 10-min

✓ Desayuno saludable

✓ Revisión de agenda

Tarde

3/5

✓ Almuerzo

✓ Respiración 5-min

✓ Caminata

Registro de ánimo

Lectura 15 min

Noche

0/2

Nota del día

Escribe algo sobre tu día...

LIGHT

Volver

Rutina del día

8/10 · 80%

Mañana

3/3 ✓

✓ Meditación 10-min

✓ Desayuno saludable

✓ Revisión de agenda

Tarde

3/5

✓ Almuerzo

Registro de ánimo

Lectura 15 min

Noche

0/2

Nota del día


Escribe algo sobre tu día...

Tareas organizadas por momento del día con checkboxes, barras de progreso y nota diaria bloqueable. Refuerza adherencia y estructura sin rigidez.

Asistente de Activación Conductual


5

Documento descriptivo orientativo. Las imágenes son simulaciones del mockup y no representan el producto final.

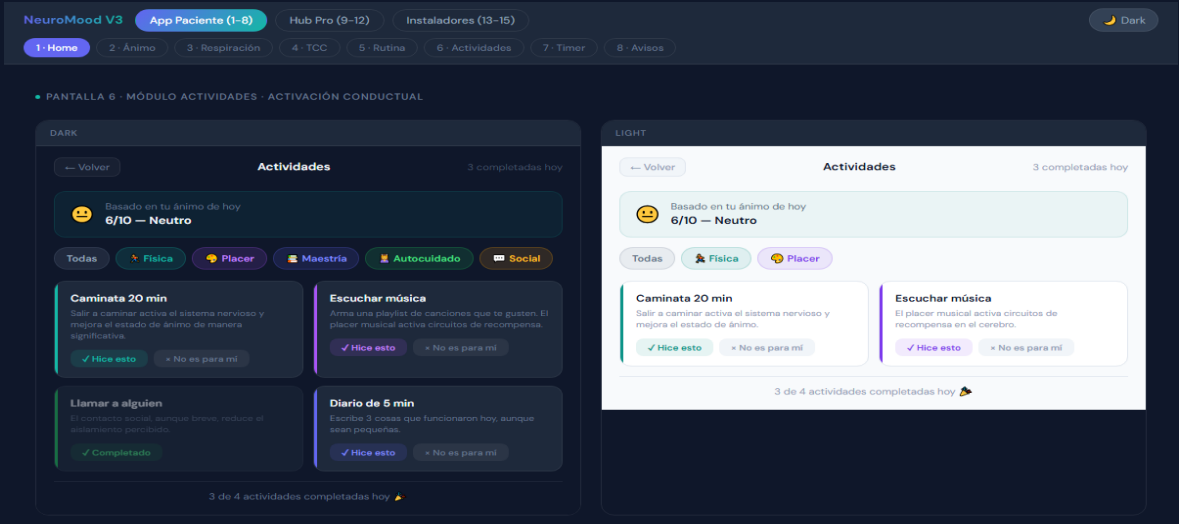


Sugerencias de actividades basadas en el animo del dia, filtradas por categoria (Fisica, Placer, Maestría, Autocuidado, Social) con acciones de completar u omitir.

Temporizador de Enfoque

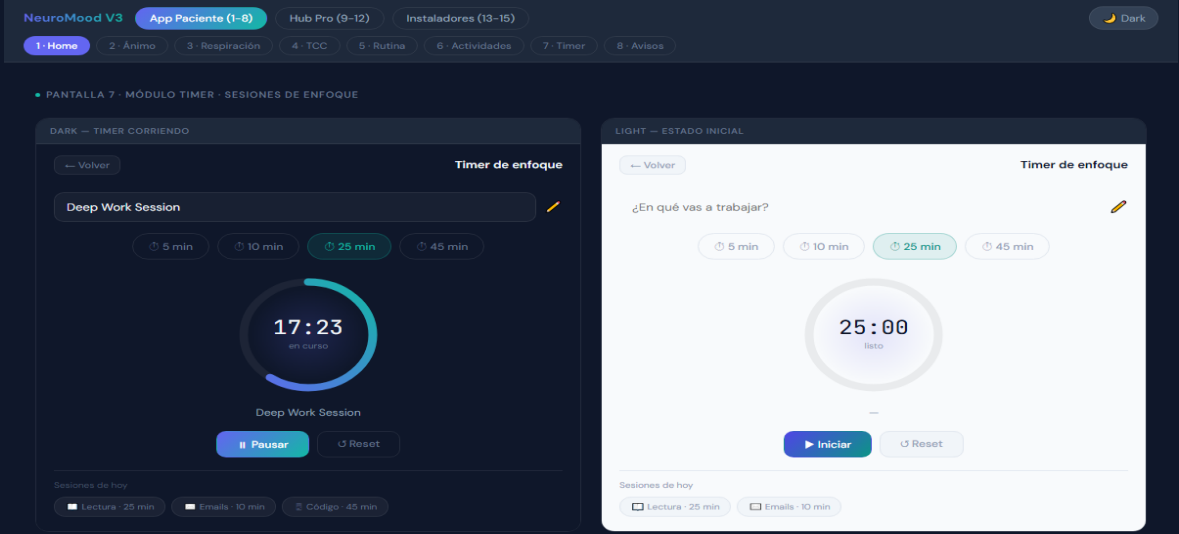

Sesiones cronometradas con nombre de tarea, presets de duracion y arco circular de progreso. Incluye historial de sesiones del dia.

Recordatorios (Avisos)

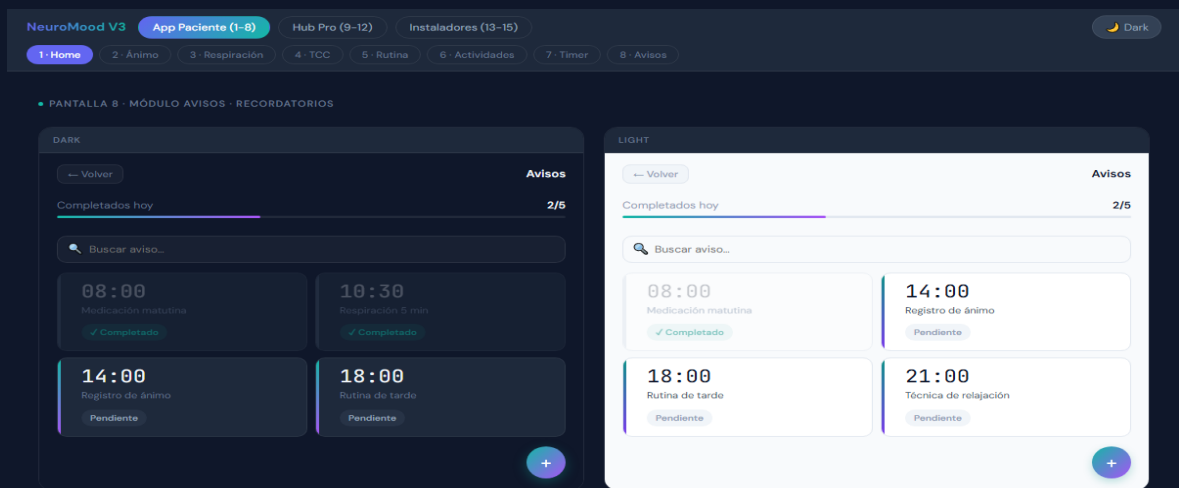

Sistema de avisos con búsqueda, indicador de progreso diario y persistencia en background. Los avisos completados se atenúan visualmente.

Uso clinico

NeuroMood no reemplaza el criterio profesional. Su aporte es ordenar senales entre encuentros, facilitar adherencia y dejar una huella de trabajo terapeutico mas legible.

Antes de la sesion

El paciente registra animo, rutinas y eventos relevantes. El profesional llega a la consulta con una vista mas clara del periodo entre sesiones, reduciendo la dependencia del relato retrospectivo.

Durante la sesion

Los registros permiten revisar ejemplos concretos, detectar barreras, ajustar indicaciones y acordar tareas mas realistas basadas en datos semanales visibles desde NeuroMood Hub.

Despues de la sesion

Recordatorios, checklist y temporizadores ayudan a sostener la intervencion en el contexto cotidiano del paciente, reforzando lo trabajado en consulta.

Seguimiento profesional


NeuroMood Hub permite observar evolucion, revisar patrones y mantener una lectura organizada del proceso. El profesional puede habilitar o bloquear modulos segun el plan terapeutico.

NeuroMood Hub para profesionales

NeuroMood Hub centraliza la supervision de pacientes, la lectura de evolucion clinica, la asistencia contextual con IA y la configuracion del sistema. Esta disenado para equipos que necesitan informacion clara sin pantallas sobrecargadas.

Pacientes


Lista con busqueda, filtros por actividad, estado de sincronizacion y acceso rapido al detalle clinico de cada persona. Incluye indicadores de adherencia con anillos de progreso.

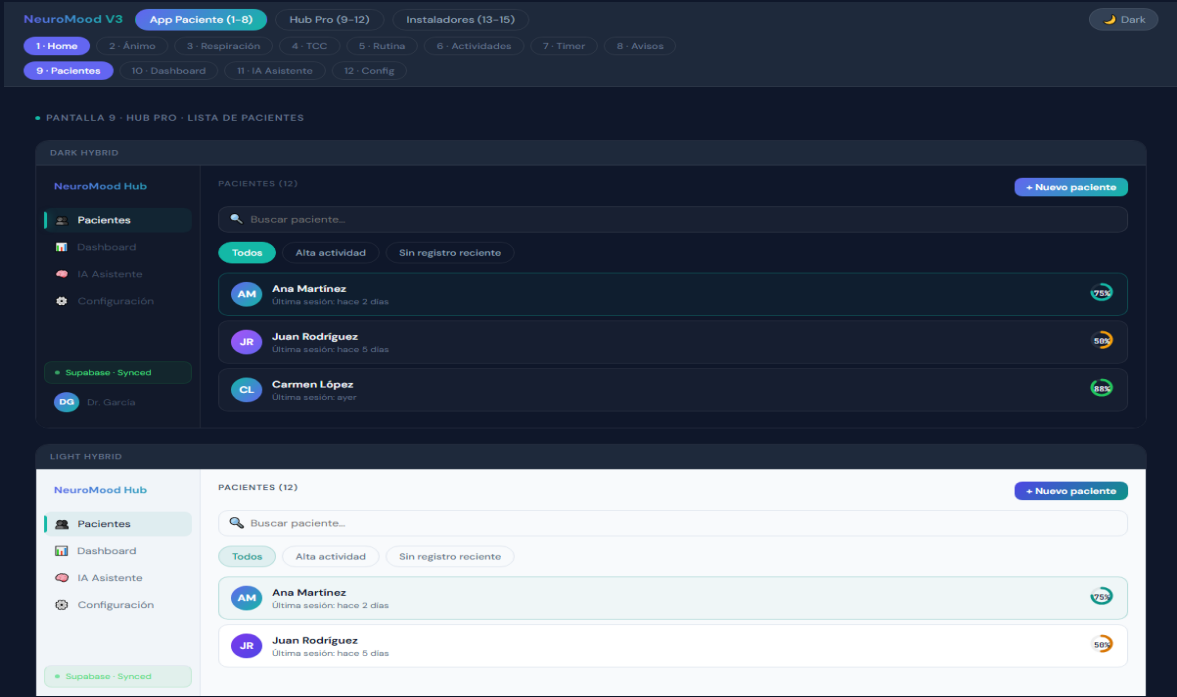

Lista de pacientes en NeuroMood Hub. Imagen orientativa.

Dashboard

Lectura visual por paciente con puntaje de animo promedio, tendencia semanal, modulos activos con progreso, actividad reciente en linea de tiempo y etiquetas clinicas configuradas por el profesional.

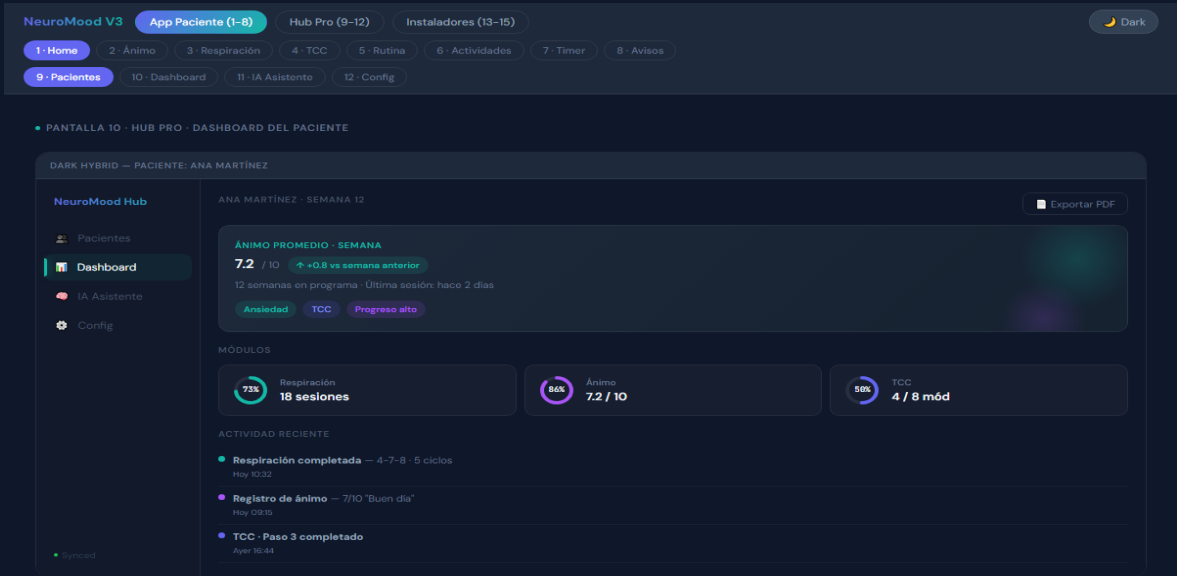

Dashboard de paciente con metricas clave. Imagen orientativa.

IA Asistente

Apoyo para ordenar informacion clinica, preparar preguntas para la sesion o sintetizar contexto del paciente. Utiliza el modelo Llama 3 mediante Groq. No reemplaza el juicio profesional; es una herramienta de consulta.

Configuracion


Panel con estado de conexion Supabase, configuracion de tema visual, selector de proveedor IA y log de sincronizacion en tiempo real.

Instaladores

La instalacion se presenta como un flujo guiado con pasos visibles, validacion de cuenta, consentimiento legal y mensajes claros. El objetivo es que el paciente entienda que instala, que acepta y como retirarlo.

Instalador Suite

Instala NeuroMood Suite con Wizard de 5 pasos: Bienvenida, Cuenta (Supabase Auth), Consentimiento legal, Instalacion y Finalizacion. Incluye acceso directo en escritorio y menu inicio.

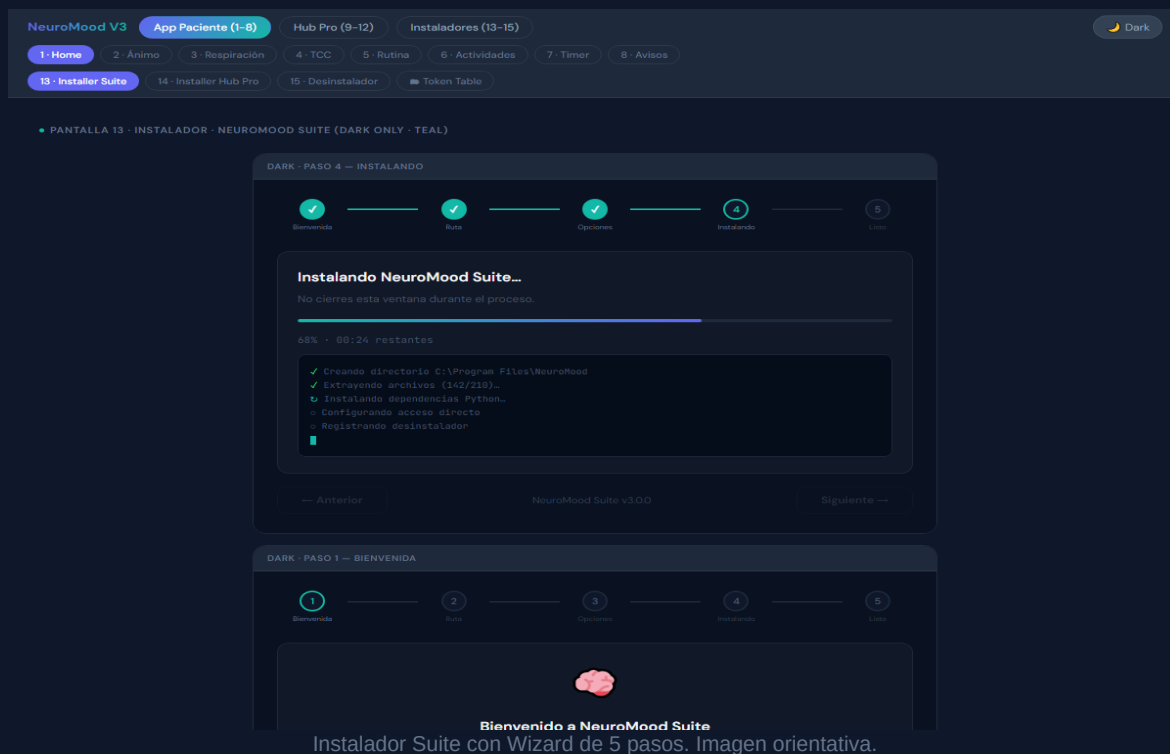


Instalador Hub Pro


Instala NeuroMood Hub con Wizard de 6 pasos que incluye configuracion de credenciales Supabase del consultorio. Validacion de conexion en tiempo real antes de instalar.

Desinstalador Suite

Wizard de 3 pasos que permite retirar la aplicacion de forma limpia. Ofrece la opcion de conservar los datos clinicos en una ubicacion segura antes de eliminar los archivos (recomendado si se planea reinstalar).

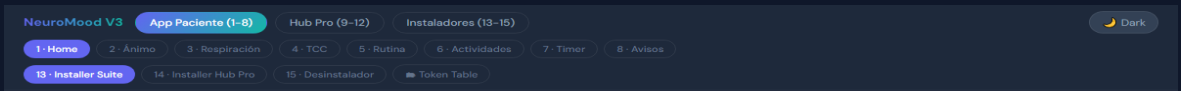

• PANTALLA 15 · DESINSTALADOR · SUITE + HUB PRO (DARK · TONO SOBRIO)

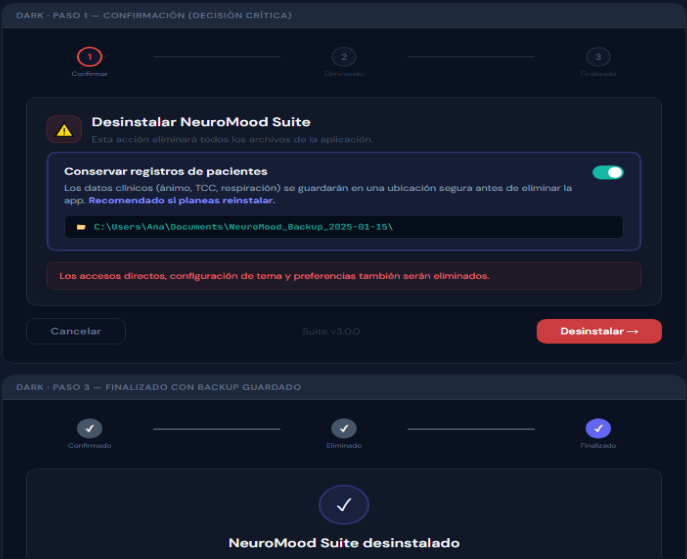

Desinstalador con opción de conservar datos. Imagen orientativa.

Privacidad y seguridad

La información de salud requiere un trato cuidadoso. NeuroMood está diseñado para registrar lo necesario, sincronizar con control y evitar exponer datos técnicos al usuario final.

Cuenta y autenticación

El acceso se realiza mediante email y contraseña a través de Supabase Auth. Las contraseñas se protegen con PBKDF2-SHA256 (100,000 iteraciones) y nunca se almacenan en texto plano. Cada instalación utiliza una sal criptográfica única basada en el código de instalación.

Datos locales

NeuroMood Suite almacena datos en el equipo del paciente (SQLite en AppData) para funcionar sin conexión. La información permanece privada y solo se sincroniza con Supabase cuando el paciente tiene conectividad.

Sincronización

La sincronización con Supabase es incremental (últimas 48 horas) y completa cada 7 días. Los datos se transmiten cifrados. El profesional accede solo a la información de sus pacientes asignados mediante Row Level Security (RLS).

Permisos de módulos

NeuroMood Hub permite al profesional habilitar o bloquear módulos específicos según el plan terapéutico. La configuración inicial mantiene todos los módulos desbloqueados por defecto.

Aviso Legal y Consentimiento

■ **Importante:** NeuroMood Suite es una herramienta complementaria de bienestar y acompañamiento terapéutico. **No es un dispositivo médico ni sustituye el diagnóstico, tratamiento o criterio de un profesional de la salud.**

■ Naturaleza de la aplicación

NeuroMood Suite es una herramienta de apoyo al bienestar emocional. No diagnostica, trata ni previene enfermedades. Ante cualquier urgencia o crisis, el usuario debe contactar a su profesional tratante o a los servicios de emergencia correspondientes.

■ Consentimiento informado

Durante la instalación, el paciente acepta explícitamente un aviso legal completo (marcando una casilla obligatoria). Este consentimiento queda registrado localmente y en Supabase con firma de versión, timestamp UTC y alcance detallado de los permisos otorgados.

■ Alcance del consentimiento

Base de datos local, sincronización autorizada, revisión profesional desde NeuroMood Hub, visualización de datos por el profesional asignado y asistencia IA para el profesional. Cada alcance es auditable.

■ Versionado del consentimiento

Cada aceptación queda vinculada a una versión específica del documento legal. Si el aviso legal se actualiza, el sistema solicitará una nueva aceptación al paciente en la siguiente apertura de la aplicación.

■ Derechos del usuario

El paciente puede solicitar la eliminacion de sus datos en cualquier momento. El desinstalador permite conservar o eliminar los registros locales. Los datos en Supabase se eliminan segun la politica de privacidad del consultorio.

■ Uso responsable

Los registros son apoyo para la conversacion clinica. No deben usarse como unico criterio de decision terapeutica. Ante senales de riesgo, el profesional debe activar los protocolos asistenciales habituales.

Version del aviso legal: legal-2026-05-16. Version de privacidad: privacy-2026-05-16. Consulte a su profesional para mas informacion sobre el tratamiento de sus datos.