



NeuroMood

Manual de Usuario

Suite de Herramientas Terapéuticas

Documentación de uso para pacientes y profesionales

Requisitos del Sistema

Compatibilidad y especificaciones mínimas recomendadas

Especificaciones técnicas necesarias para ejecutar NeuroMood Suite correctamente en tu computadora.

Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
Espacio en disco	200 MB libres mínimo para la instalación completa
Memoria RAM	4 GB o más (recomendado 8 GB)
Resolución de pantalla	1280 × 720 px mínimo
Permisos	Cuenta de usuario estándar — no requiere administrador
Conexión a internet	No requerida una vez instalada la suite
Dependencias	El instalador incluye todas las librerías necesarias


Nota de compatibilidad

Todas las herramientas funcionan en Windows 10 y Windows 11. En Windows 11, la barra de título de cada ventana muestra el color corporativo navy de NeuroMood. En Windows 10, la barra adopta el color del tema oscuro del sistema operativo.


Instalación Paso a Paso

Cómo instalar NeuroMood Suite en tu computadora

El instalador de NeuroMood Suite es un asistente guiado de 4 pasos que configura todas las herramientas seleccionadas, crea accesos directos y registra la suite en el panel de control de Windows para una desinstalación limpia.

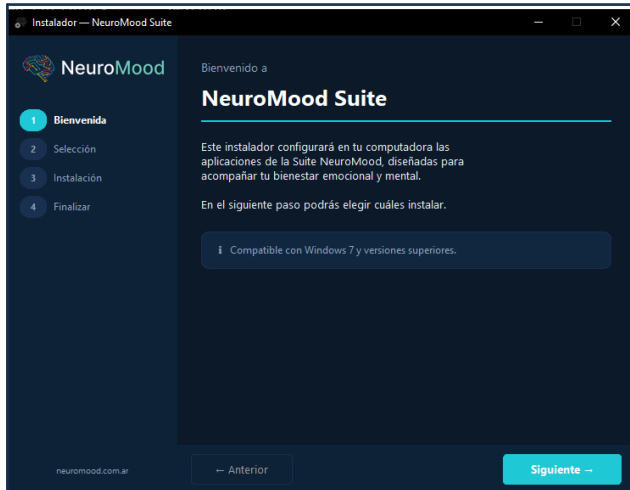

Paso 1 — Bienvenida

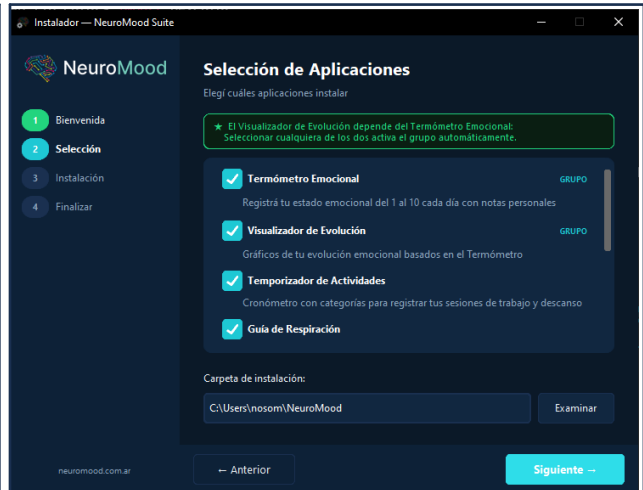

Paso 2 — Selección de apps

Pasos de instalación

1. **Ejecutá el instalador** — Hacé doble clic en NM_Installer.exe. Si Windows solicita permiso UAC, hacé clic en Sí para continuar.
2. **Seleccioná las aplicaciones** — Elegí cuáles herramientas instalar. El Visualizador de Evolución requiere el Termómetro Emocional: seleccionar uno activa el otro automáticamente.
3. **Elegí la carpeta de instalación** — La carpeta predeterminada es C:\Users\[usuario]\NeuroMood. Podés cambiarla con el botón Examinar.
4. **Completá la instalación** — Hacé clic en Instalar. Al finalizar, elegí si crear accesos directos en el Escritorio.

Termómetro Emocional

Registrá tu estado emocional del 0 al 10 con notas personales

NeuroMood · Termómetro Emocional

NeuroMood Termómetro Emocional
Registrá tu estado de ánimo diario

Light

¿Cómo te sentís hoy?

0 10

5 — Regular

Nota (opcional)

Registrar estado

Historial de registros

Sin registros aún

Acerca de

Descripción


Herramienta de autorregistro emocional que permite puntuar el estado de ánimo en una escala del 0 al 10 cada día. Admite notas personales para contextualizar el registro y muestra el historial de los últimos días con código de colores que varía del rojo (0) al verde (10).

Instrucciones de uso

1. Ajustá el deslizador al valor que mejor represente tu estado emocional actual (0 = muy bajo, 10 = excelente).
2. Escribí una nota opcional en el campo de texto para contextualizar el registro del día.
3. Presioná **Guardar registro** para confirmar la entrada.
4. Revisá el historial de los últimos días en el panel lateral derecho.

Visualizador de Evolución

Gráficos de tendencia emocional basados en el Termómetro

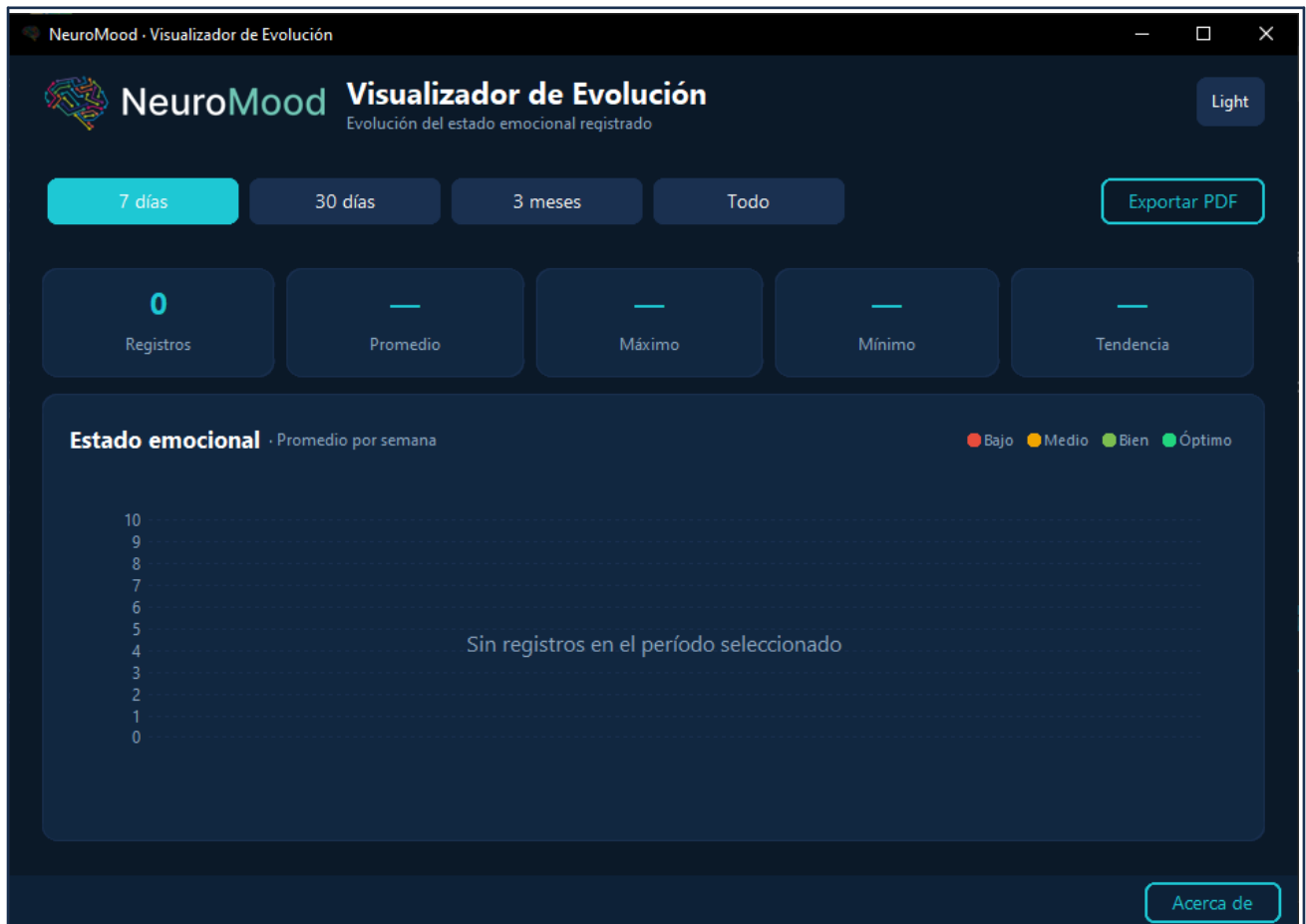

Descripción

Genera gráficos interactivos con la evolución emocional registrada en el Termómetro Emocional. Permite visualizar tendencias en períodos de 7 días, 30 días, 3 meses o el historial completo, y exportar el informe a PDF. Requiere datos previos en el Termómetro Emocional para mostrar contenido.

Instrucciones de uso

1. Requiere registros previos en el **Termómetro Emocional**.
2. Seleccioná el período de análisis con los botones de la barra superior (7 días, 30 días, 3 meses o Todo).
3. Explorá el gráfico de línea para identificar tendencias y patrones emocionales.
4. Presioná **Exportar PDF** para generar un informe descargable con los datos del período.

Temporizador de Actividades

Cronómetro con categorías para registrar sesiones terapéuticas



Descripción

Cronómetro con categorías para delimitar y registrar actividades terapéuticas en el tiempo. Admite duraciones predefinidas (5, 10, 15, 20 y 30 minutos) o personalizadas. Guarda automáticamente cada sesión completada con nombre, categoría y duración real. Puede enviarse a la bandeja del sistema mientras el temporizador está en ejecución y emite una alerta visual y sonora al finalizar.

Instrucciones de uso

1. Ingresá el nombre de la actividad en el campo de texto.
2. Seleccioná la categoría: Relajación, Cognitiva, Física, Social o Autocuidado.
3. Elegí la duración con los botones rápidos (5'–30') o ingresá un valor personalizado en el campo **min**.
4. Presioná **Iniciar** para arrancar el temporizador.
5. Usá **Pausar / Reanudar** para interrumpir la sesión. Al finalizar, el registro se guarda automáticamente.

6. Cerrará la ventana para enviar el temporizador a la bandeja del sistema mientras seguís usando la computadora. Al vencer el tiempo, la ventana se restaura automáticamente en el mismo estado (maximizada o normal) con una alerta visual y sonora.

Guía de Respiración

Técnica guiada 4-7-8 con animación y registro de sesiones



Descripción


Guía animada de la técnica de respiración 4-7-8 (inhalar 4 segundos, retener 7 segundos, exhalar 8 segundos). Incluye un círculo animado sincronizado con cada fase y registra automáticamente cada sesión con ciclos completados y tiempo total.

Instrucciones de uso

1. Seleccioná la duración de la sesión con los botones de tiempo disponibles.
2. Presioná **Iniciar** para comenzar la guía animada.
3. Seguí las instrucciones del círculo animado: inhalar — retener — exhalar.
4. Al completar la sesión, el registro se guarda automáticamente.

Checklist de Rutina

Organización de tareas por turno con seguimiento diario

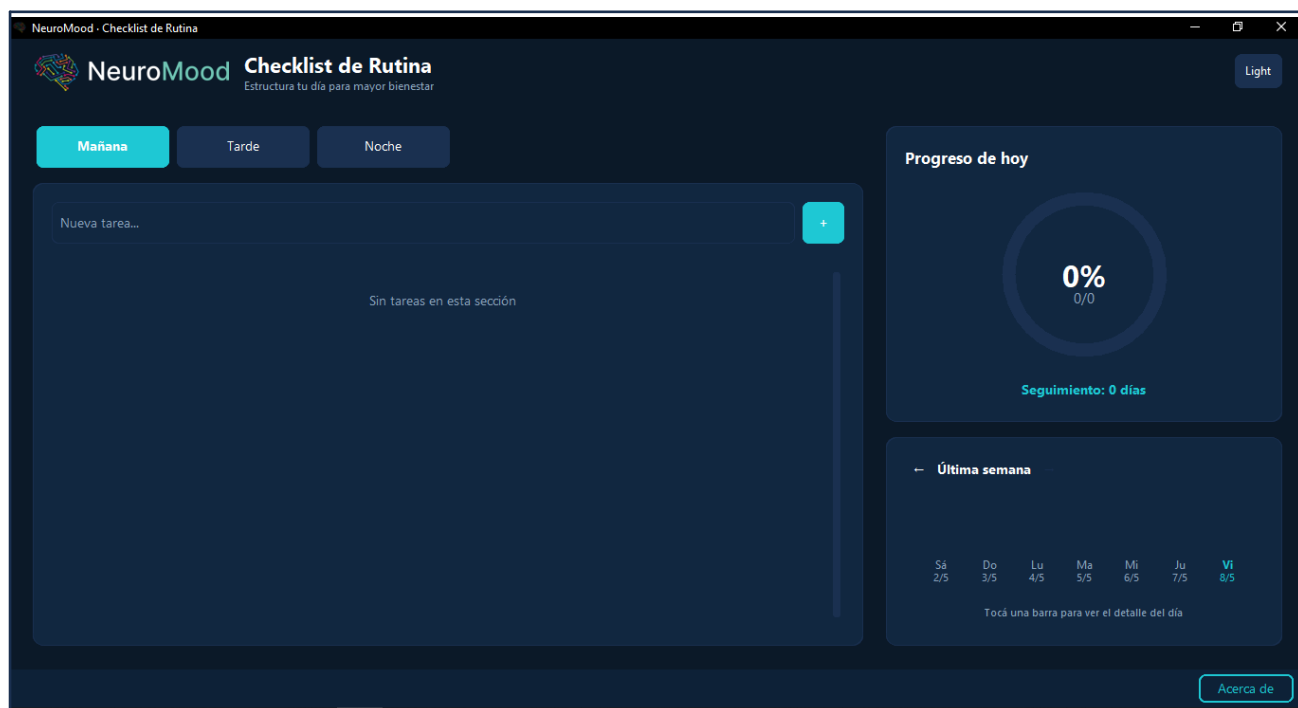

Descripción

Organizador de tareas cotidianas dividido en secciones de Mañana, Tarde y Noche con seguimiento de progreso diario y semanal. Permite agregar tareas personalizadas a cada sección y consultar el cumplimiento en un calendario semanal con vista por día.

Instrucciones de uso

1. Seleccioná la sección del día: Mañana, Tarde o Noche.
2. Ingresá el nombre de una tarea y presioná el botón + para agregarla.
3. Marcá cada tarea como completada tildando la casilla correspondiente.
4. Consultá el progreso del día y el seguimiento semanal en la parte inferior.

Recordatorios de Bienestar

Notificaciones personalizadas con horarios y días específicos

NeuroMood · Recordatorios de Bienestar

NeuroMood **Recordatorios de Bienestar**
Reforzá hábitos saludables con recordatorios personalizados

Light

Recordatorios activos

No hay recordatorios configurados

Nuevo recordatorio

Hora (HH:MM)
08:00

Mensaje
Tomá agua

Días activos
☒ Lu ☒ Ma ☒ Mi ☒ Ju ☒ Vi ☒ Sá ☒ Do

Agregar recordatorio

Modo silencio

Desde: 23:00 Hasta: 07:00

Guardar horario

Descripción

Sistema de recordatorios personalizados con horarios y días específicos de la semana. Al cerrar la ventana continúa activo en la bandeja del sistema y emite alertas visuales y sonoras en los horarios configurados. Al dispararse un recordatorio, la ventana se restaura automáticamente en el mismo estado en que estaba. Soporta múltiples recordatorios con estado activo/inactivo.

Instrucciones de uso

1. Presioná + **Nuevo recordatorio** para crear una entrada.
2. Ingresá el mensaje, seleccioná la hora y los días de la semana activos.
3. Activá o desactivá el recordatorio con el interruptor correspondiente.
4. Cerrá la ventana para enviarla a la bandeja del sistema; seguirá monitoreando en segundo plano. Al dispararse un recordatorio, la ventana se restaura automáticamente en el mismo estado (maximizada o normal).

Registro de Pensamientos

Identificá y reformulá pensamientos automáticos en 4 pasos

NeuroMood · Registro de Pensamientos

NeuroMood Registro de Pensamientos
Identificá y cuestioná pensamientos automáticos

Light

Paso 1 de 4

¿Qué estaba pasando?

Describí la situación que desencadenó el pensamiento

Siguiente →

Historial

Buscar...

Sin registros

Acerca de

Descripción


Herramienta de reestructuración cognitiva para identificar, analizar y reformular pensamientos automáticos negativos. Permite registrar la situación disparadora, el pensamiento automático, la emoción asociada y un pensamiento alternativo más equilibrado. Todos los registros quedan guardados en el historial.

Instrucciones de uso

1. Completá el paso 1: describí la situación que desencadenó el pensamiento.
2. Avanzá con el botón **Siguiente** → e identificá el pensamiento automático negativo.
3. En el paso 3, registrá la emoción que generó ese pensamiento.
4. En el paso 4, formulá un pensamiento alternativo más equilibrado y guardá el registro en el historial.

Asistente de Activación

Activación conductual adaptada al nivel de energía actual

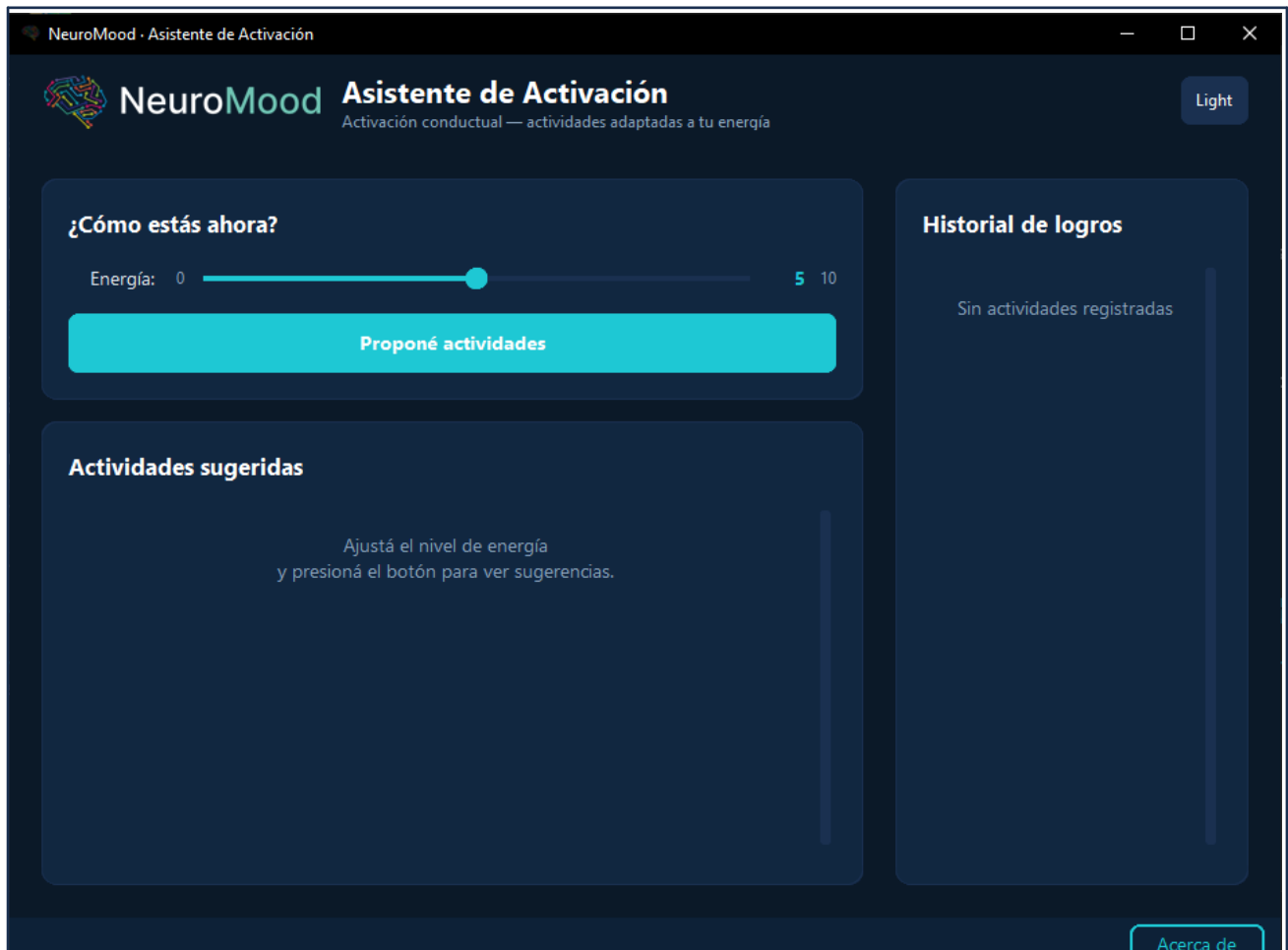

Descripción

Genera sugerencias de actividades conductuales adaptadas al nivel de energía actual. Basado en principios de activación conductual terapéutica, propone tareas de bajo, medio o alto nivel de demanda según la energía reportada y registra un historial de actividades realizadas.


Instrucciones de uso

1. Ajustá el deslizador de Energía (0 = agotado, 10 = máxima energía).
2. Presioná **Proponé actividades** para recibir sugerencias adaptadas.
3. Revisá las actividades sugeridas y elegí la que mejor se ajuste a tu estado.
4. Usá los botones **Hecha**, **Intentada** o **No pude** para registrar el resultado en tu historial.

Desinstalación

Cómo eliminar NeuroMood Suite del sistema

El desinstalador elimina de forma segura todas las aplicaciones, accesos directos, archivos y entradas del registro de Windows. Ofrece la opción de conservar o eliminar los datos personales (registros, historial y configuración).

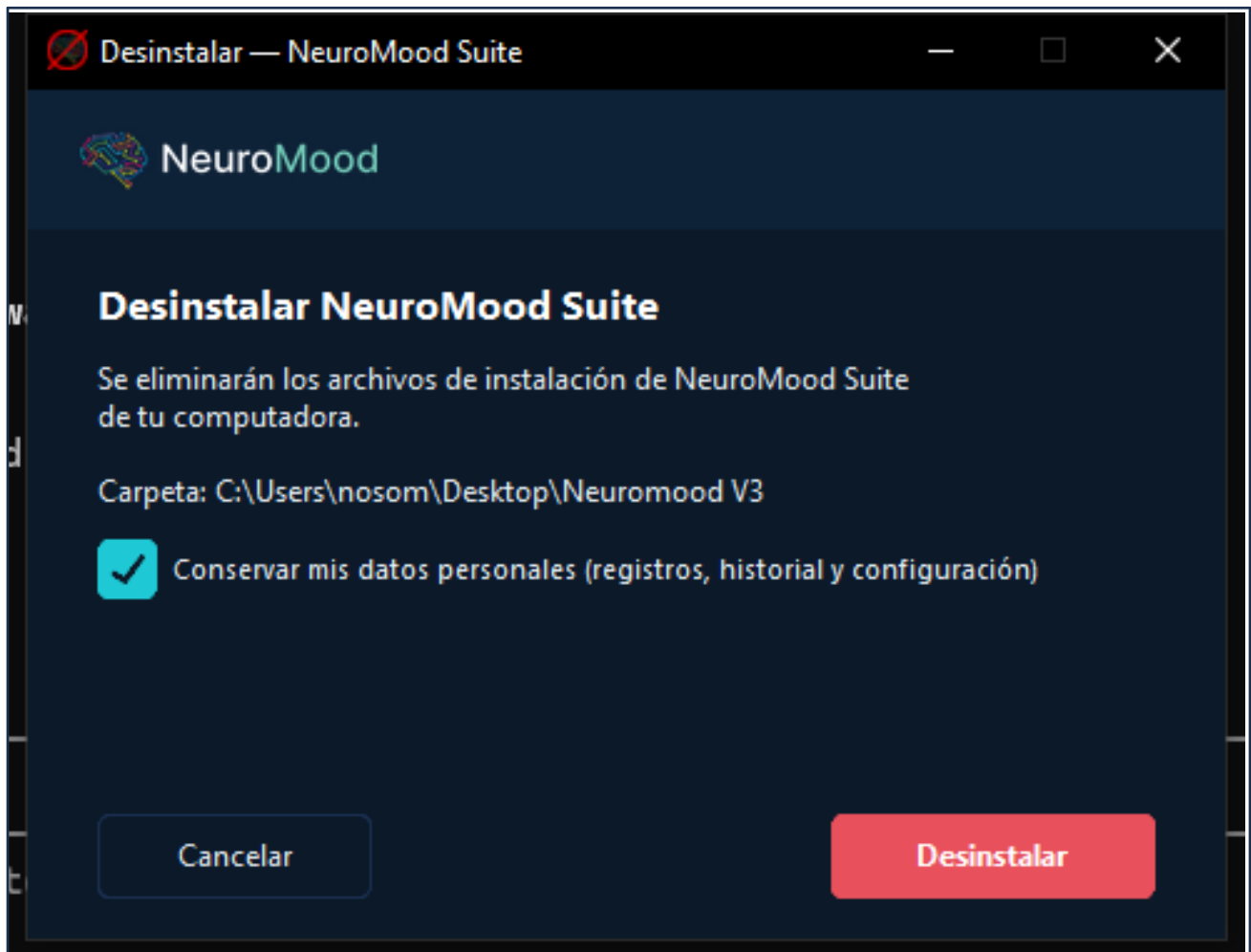

Pasos para desinstalar

1. Abrió el Panel de control → Programas → Desinstalar un programa, buscá **NeuroMood Suite** y hacé doble clic. También podés ejecutar NM_Uninstaller.exe directamente desde la carpeta de instalación.
2. En la pantalla de confirmación revisá la carpeta de instalación detectada y presioná **Desinstalar**.
3. El proceso cerrará automáticamente las apps abiertas, eliminará los archivos de instalación, los accesos directos y la entrada del registro de Windows.
4. Al finalizar, la suite queda completamente eliminada. Los datos personales se eliminan o conservan según la opción elegida en el paso anterior.

Si el desinstalador no puede borrar archivos en uso, cerrará todas las aplicaciones de NeuroMood antes de ejecutarlo.